

ÚSTNA SPRCHA WATER GENIUS


model: No. PM-1136




Dakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Starostlivo si prosím prečítajte tento návod pre zaistenie bezpečného a účinného používania tohto výrobku. Uchovajte ho aj pre ďalšie použitie.

Popis častí:

- A) Nádržka
- B) Ryska maximálneho naplnenia
- C) Sacia trubička
- D) Tlačidlo
- E) Pumpička
- F) Hubica s tryskou

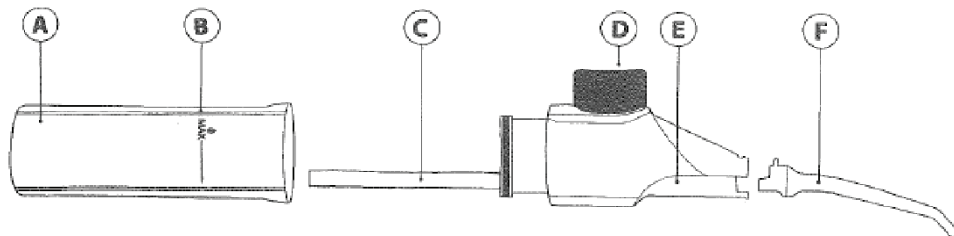

Pri používaní držte ústnu sprchu vo zvislej polohe. V inom prípade je možné, že voda vytečie cez štrbiny pod nádržku.

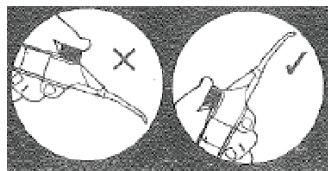

Príprava na používanie:

Pred použitím ústnej sprchy oddelte nádržku od zariadenia s pumpičkou a ponorte ju do vody tak, aby bola potopená sacia trubička aj hubica s tryskou. Stlačte tlačidlo niekoľkokrát za sebou. Potom zdvihnite koniec hubice s tryskou von z vody a opäť stlačte tlačidlo, aby ste sa uistili, že jednotka správne funguje a má stále rovnaký prúd vody.

Plnenie ústnej sprchy:

1. Držte sprchu zvisle, tryskou nahor, jemne pootočte nádržku vľavo a oddelte ju od pumpičky.
 2. Naplňte nádržku na požadovaný objem maximálneho naplnenia vodou (prípadne Vašou preferovanou ústnou vodou).
- Poznámka: Používajte iba takú ústnu vodu, ktorá má rovnakú konzistenciu (hustotu) ako obyčajná voda.
3. Pripojte nádržku späť k pumpičke tak, že ju vložíte pod pumpičku a jemne pootočíte vpravo. Tým ju zaistíte na svojom mieste.

Používanie:

1. Umiestnite palec na tlačidlo (viď obrázok vyššie).
2. Pri používaní vždy držte ústnu sprchu vo vodorovnej polohe, prípadne smerom nahor.
3. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo, kým tekutina nezačne prúdom vytekať z trysky. Rýchlosť a mieru tečúceho prúdu je možné regulovať tak, že vyviniete rozdielny tlak na tlačidlo. Pre lepšie výsledky sa pokúste počas používania vyvíjať rôzny tlak a meniť uhol ústnej sprchy v ústach.
4. Aby ste vyčistili aj medzizubné priestory, nasmerujte hubicu zariadenia na medzeru medzi zubami, utesnite svoje ústa okolo hubice a stlačte tlačidlo. Pre optimálne výsledky použite zariadenie na prednú aj zadnú stranu zubov, potom pokračujte na ďalších zuboch.
5. Na vyčistenie mostíkov, strojčiek, zubných implantátov, či iných častí pod ne umiestnite hubicu a stlačte tlačidlo. Pre lepší výsledok postriekajte každú stranu vodou pod viac ako jedným uhlom. Použite toľko uhlov, koľko je možné.

Udržba ústnej sprchy:

1. Po každom použití vyprázdnite nádržku a niekoľkokrát stlačte tlačidlo, aby ste odstránili zostávajúcu tekutinu z celej jednotky. Utrite sprchu vlhkou handričkou namočenou vo vlažnej vode a starostlivo ju osušte.
2. Z hygienických dôvodov s nikým svoju ústnu sprchu nezdielajte.
3. Sprchu uskladňujte na hygienickom mieste a uistite sa, že hubica s tryskou nemôžu byť na tomto mieste nijako poškodené.
4. Počas cestovania uskladnite zubnú sprchu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis:

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v príloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmennili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje:

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby. Vybrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.